

*Make your life healthy
and beautiful every day!*

Vibreeriv jalalabade massaažiseade

AI-568 Kasutusjuhend



Sisukord

Ohutusjuhised	1
Toote ülevaade	4
Toote omadused	5
Ettevalmistused kasutamiseks	6
Toote kasutamine.....	8
Riidest katte eemaldamine	9
Õige massaažiasend	10
Toote hooldus ja hoiustamine	11
Veaotsing ja spetsifikatsioonid	12

Ohutusjuhised

Täname, et olete valinud meie toote. Palun lugege käesolevad ohutusjuhised hoolega läbi ja järgige neid, kuna need aitavad toodet õigesti kasutada ja kasutamisega seotud ohte vältida. Olenevalt hoiatuse tõsisusest on käesolevas juhendis kasutatud märksõnu „Hoiatus“ ja „Ettevaatust“. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.

Hoiatus

Ärge kasutage tundmatu pingega vooluallikat	Põhjustab elektrilöögi või tulekahju
Elektrikatkestuse korral	Seadme kasutusea pikendamiseks lülitage seade toitelülitist välja ja tõmmake toitejuhe seinast.
Kui seade on juhitamatu	Tõmmake seadme toitejuhe seinast välja ja võtke ühendust seadme edasimüüjaga.
Kui seadet ei kasutata	Lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinast.
Katkise toitejuhtme või pistiku korral	Võtke ühendust tootja või remonditeenindusega.
Seadme töötamise ajal	Ärge katsuge massaažiseadme kangast kättega.

Tähelepanu

Soovitame massaažiseadet kasutada maksimaalselt 30 minutit korraga, pikem kasutusaeg võib põhjustada lihasjäikust ja neuropaatilist valu.

1. Kui teil esineb mõni alljärgnevatest seisunditest, konsulteerige enne massaažiseadme kasutamist arstiga:

- südamestimulaatori või muu kehasisese elektroonilise meditsiiniseadme kasutamine;
- südamehaigused;
- venitused; luustiku haprus;
- olete äsja käinud operatsioonil;
- olete rase või äsja sünnitanud;

Ohutusjuhised

osteoporoos;
vereringehäired või tromboos;
nahapõletik;
ravi või abistava ravi saamine;
ebatavalised jäsemed;
õnnetuse või haiguse tagajärjel tekkinud jalavigastused.

- Ärge kasutage seda seadet, kui selle korpus on kahjustunud või kui sellel esineb mehaanilisi või elektroonilisi rikkeid. Sellisel juhul võtke ühendust seadme edasimüüja või tootjaga.
- Ärge kasutage seadet märjas või kõrge temperatuuriga kohas või kuumusallikate, näiteks radiaatorite või ahjude lähedal.
- Ärge kandke jalgadele enne seadme kasutamist ega kasutamise ajal meditsiinilist ega meigikreemi.
- Parandamiseks saatke seade volitatud teeninduskeskusesse. Ärge püüdke seadet ise parandada, vastasel juhul muutub seadme garantii kehtetuks.
- Ärge raputage ega visake seadet.
- Ärge kasutage seadet ühe tunni jooksul enne ega pärast sööki.
- Ärge kerige seadme juhet kokku ega painutage seda, kuna see võib põhjustada juhtme kahjustusi.
- Ärge seiske seadmel ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Rikke korral tõmmake seadme toitejuhe vooluvõrgust välja ja võtke kohe ühendust seadme tootjaga.

Ohutusjuhised

- Elektriseadme kasutamine vee lähedal on ohtlik. Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas, kraani või basseini lähedal.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, laske see ohult asendada vaid seadme tootjal või tootja poolt volitatud teeninduskeskuses või vastava kvalifikatsiooniga isikute poolt.
- Ärge kahjustage toitejuhete – ärge painutage, voltige seda kokku, rebige katki, sikutage, siduge ega väänake. Ärge laske toitejuhtmel jääda raskete esemete alla. Seadme liigutamisel ärge kinnitage toitejuhete seadme keskele. Kahjustunud toitejuhe võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ärge jääge seadet kasutades magama ega kasutage seda alkoholi mõju all olles ega kõrge palavikuga.
- Seadme võib paigutada vaid vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele.
- Seadet ei tohi kasutada meditsiiniseadmena.
- Hoidke seadmel käivitumise ajal silm peal.
- Ärge jätke seadet keskkonda, kus võib olla bensiini, lahustit, alkoholi, valgendit või muid äärmiselt söövitavaid aineid, kuna need võivad põhjustada seadme värvimuutuse, deformatsiooni, pragunemise või rikked.
- Isikud, kellel on nõrk keha (sh lapsed), meele- või neuroloogiline puude või puudub piisav asjakohane kogemus ja teadmised, tohivad seadet kasutada vaid järelevalve all ja seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamiset.
- Ärge laske seadmel otse naha vastu puutuda.
- Ärge laske lastel seadmega mängida.
- Sellel seadmel on küttekeha, kuumust mitte tajuvad inimesed peavad seadme kasutamisel olema ettevaatlikud.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks ühele inimesele korraga.
- Kui tunnete end massaaži ajal halvasti, lõpetage kohe seadme kasutamine.
- Ärge sisestage seadme avadesse esemeid ega laske neid sinna kukkuda.

Toote ülevaade



Toote omadused

★ Uus kontseptsioon, innovaatiline disain

Uus välimus, voolujooneline kaasaegne disain ja kaasaskandmise võimalus.

★ Erinevad massaažid

Jalarulliku, kraapimisfunktsiooni, vibratsiooni, õhkmassaaži ja soojendusfunktsiooniga seade masseerib jalalabad kogu nende ulatuses, teostab sügavuti punktmassaaži, stimuleerides kogu keha meridiaane.

★ Soojendusfunktsioon

Soojendusfunktsiooniga jalaosad, tallavõlvi soe massaaž, süsinikkiududega kuum kompress jalaseljale. Professionaalsele soojusmassaažile sarnanev soojusteraapia aitab vähendada väsimust, stimuleerib meridiaane ja keha vereringet.

★ Mugav hoiustada

Toitejuhtme kogumisseadmega massaažiseadet on lihtne hoiustada.

★ Eemaldatav kate

Kate on eemaldatav, pestav ja vahetatav.

★ Ohutus

Jalgade massaažiseadmest võib ootamatu elektrikatkestuse ajal õhk välja tulla.

★ Toote funktsioonid

Vähendab jalalabade ja jalgade survet, parandab lihaste painduvust ja vereringet, leevendab sportimisjärgset lihasvalu, stimuleerib nõelravipunkte, parandab keha üldist heaolu ja leevendab väsimust.

5

Ettevalmistused kasutamiseks

1.Asukoht

Asetage seade kuiva kohta, kus see ei ole pikemat aega otsese päikesevalguse käes. Töömüra vähendamiseks asetage seade vaiba peale.




6


Ettevalmistused kasutamiseks

2. Seadme ühendamine vooluvõrku

Sisestage seadme pistik seinakontakti.

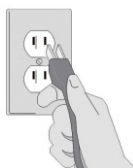

Veenduge, et toitejuhe ei oleks kahjustunud.

 Pistikut on keelatud märgade kätega seinakontakti sisestada või sealt välja tõmmata.




Kasutamine

1. Sisestage seadme pistik seinakontakti.
2. Elektriote olemasolul hakkab sisse- ja väljalülitamisnupp vilkuma.
3. Seadme käivitamiseks vajutage sisse- ja väljalülitamisnuppu.
4. Valige massaažiprogramm.

7

Juhtpaneeli kasutamine

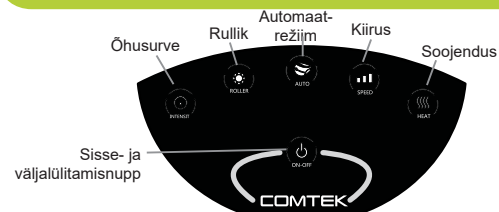

1. Sisse- ja väljalülitamine: Sisestage seadme pistik seinakontakti, vajutage seda nuppu ja nupu märgutuli hakkab vilkuma. Seejärel vajutage nuppu uuesti ja massaažiseade käivitub (märgutuli põleb) ning läheb 1. automaattmassaaži režiimi, õhusurvevõrgus toimub keskmise tugevusega, soojendusfunktsioon on sisse lülitatud ja seade hakkab kuvama 15-minutilise massaaži kestvat aega. (Kui kõik massaaži programmid on välja lülitatud, siis loendamise peatub. Kui käivitate massaaži programmi uuesti, algab uus 15-minutilise tsükkel. Pärast 15 minuti möödumist lülitub seade automaatselt välja.) Nupu vajutamisel kolmandat korda lülitub seade välja ja nupu märgutuli hakkab vilkuma.
2. Ohusurve: automaatrežiimis olles vajutage seda nuppu, et reguleerida automaattmassaaži õhusurve intensiivsust (madal-keskmine-kõrge). Manuaalrežiimis olles vajutage seda nuppu, et valida õhusurve intensiivsust (madal-keskmine-kõrge). Süttib vastava tugevuse märgutuli (madal – sinine, keskmine – roheline, kõrge – punane).
3. Rullik: kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, misjärel lülitub sisse vibreerimisfunktsioon, rullik pöörleb päripäeva ja süttib sinine märgutuli. Nupu teistkordset vajutamisel süttib roheline märgutuli, vibreerimisfunktsioon lülitub välja ja rullik pöörleb vastupäeva. Nupu vajutamisel kolmandat korda märgutuli kustub ja rullik peatub.
4. Automaatrežiim: Kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et valida 1. automaatrežiimi (sinine märgutuli) ja 2. automaatrežiimi (roheline märgutuli) vahel. Automaatrežiimis olles töötavad jalarullik, vibreerimisfunktsioon ja õhusurvevõrgus vaikimisi määratud režiimides. Ohkpatjade massaaži intensiivsus on selles režiimis vaikimisi keskmisel tasemel.
5. Kui manuaalrežiimis olles on valitud rulliku funktsioon või vibreerimisfunktsioon, saab kasutada ka kiiruse reguleerimise nuppu: vajutage seda nuppu, et valida keskmise (sinine ja roheline märgutuli), kõrge (sinine, roheline ja punane märgutuli) või madala (sinine märgutuli) vahel.
6. Soojendus: kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, misjärel käivitub soojendusfunktsioon ja süttib vastav märgutuli. Nupu teistkordset vajutamisel märgutuli kustub ja soojendusfunktsioon lülitub välja. Nupu järjestikuse vajutamisel kordub sama tsükkel.

Märkus. Iga nupuvajutuse korral näitab märgutuli, kui funktsioon on edukalt valitud.

8

Riidest katte eemaldamine

Riidest katte õige eemaldamine

1. Tõmmake lukk lahti.
2. Eemaldage riidest kate.



Riidest katte õige paigaldamine

1. Kinnitage riidest kate takjapaelkinnituste abil.
2. Tõmmake lukk kinni.
3. Korrastage.



9

Õige massaažiasend



Ärge asetage oma käsi kangast kätte sisse.

10

Toote hooldus ja hoiustamine

1. Hooldus

Hoiatus

Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.

Kui seadmel esineb pärast selle kasutamist plekke, pühkige need neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale, näiteks bensiini, alkoholi ega lahustit). Seejärel pühkige pind kuiva lapiga puhtaks ja laske õhu käes kuivada. (Ärge püüdke seadet loomulikust kuivamisest kiiremini kuivatada.)

Soovitus

Seadmega saab parima massaažiefekti 15 minuti jooksul.

2. Hoiukoht

Hoidke seadet järgmises tingimustes:

temperatuur: 0 °C–40 °C

suhteline õhuniiskus: (ilma kondensatsioonita) 30%–85%.

Vältige seadme hoiustamist kõrgel temperatuuril, niiskes kohas ja otsese päikesevalguse käes ning keskkonnas, kus esineb söövitavaid gaase.

Esmalt puhastage seade, seejärel paigutage see kuiva ja puhtasse kohta.

Ärge kasutage seadet väga tolmuses, rasvases, niiskes ega suitsuses keskkonnas. Ärge asetage seadet kuumusallikate lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte ning ärge kasutage seda välitingimustes.

Veaotsing ja spetsifikatsioonid

1. Veaotsing

Kuna seadet juhib mikroarvuti, on see tundlik pingekoikumistele. Kui pinge kõigub nimipingi piires 10–15%, võib see tekitada häireid seadme töös.

Võimalik probleem	Lahendus
Massaažiseade ei hakka tööle, kuigi on sisse lülitatud.	1. Kontrollige, et seadme lüliti ja toitejuhe oleks töökorras. 2. Kontrollige, et pistiku ja seinakontakti ühendus oleks korralik.
Massaažiseade ei hakka tööle, kuigi on sisse lülitatud.	Pärast liiga pikka töötamist on seadme temperatuur liiga kõrge ja seade lülitub enda kaitsmiseks välja. Lülitage seade vähemalt 30–50 minutiks välja, et see saaks maha jahtuda.
Seadme töötamise ajal juhtpaneel ei tööta ja seade katkestab töö.	1. Kui taimer peaks käima, kuid ei käi, vajutage seadme töö taastamiseks sisse- ja väljalülitamisnuppu. 2. Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui probleem ei ole tekkinud eespool nimetatud põhjustel, võtke palun ühendust seadme tootja või kohaliku edasimüüjaga.

2. Spetsifikatsioonid

Vibreeriv jalalabade massaažiseade	
Mudel: AI-568	Netokaal: 5,6 kg
Sisendpinge: AC100–240V	Sagedus: 50/60 Hz
Võimsus: 60 W	Tööaeg: 15 min
Pakendi mõõtmed: 402 x 277 x 475 mm	Ohutusklass: <input type="checkbox"/>

Tootja jätab endale õiguse toote disaini ette teatamata muuta. Palun vaadake tegelikku toodet.